


nal von minden Drug-Screen® Sticktest: testgenomförande och utvärdering

Testgenomförande: Sticktest


1

Du behöver:
Sticktest, urinprov, handskar.

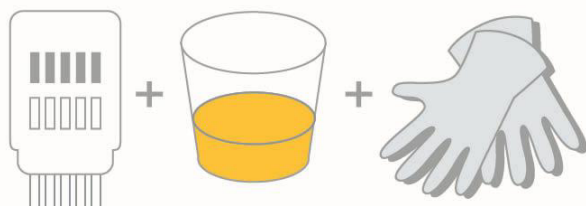

2

Ta av locket på testet. Doppa ner testremsan i urinprovet i 15-30 sekunder, tills resultatfönstret är färgat ljusgult. Var försiktig med att inte doppa ner plasten i urinprovet. Placera därefter tillbaka locket på testet.

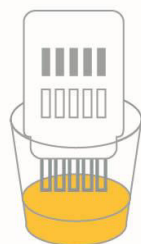

3

Placera testet på en ren och plan yta. Resultatet går att avläsa efter 5 minuter. När mer än 10 minuter har gått är resultaten ogiltiga.



5 minuter

Avläsa resultat

Negativt:

I resultatfönstret visas två röda linjer, en kontrollinje (C) och en testlinje (T). Det betyder att koncentrationen av drogen ligger under cut-off värdet eller att drogen inte finns i provet alls.



Färgintensiteten av testlinjen (T) kan variera.

Positivt:

I resultatfönstret syns endast en röd linje kontrollinjen (C). Testlinjen (T) visar sig inte.



Ogiltigt:
Kontrollinjen (C) syns inte.

