

Snabbguide

Analys av urinsticka – Multistix Med användar-ID


STEG
1

Tryck på "Analysera sticka"



STEG
2

Tryck på "Senaste användare" eller
"Ange nytt användarnamn"

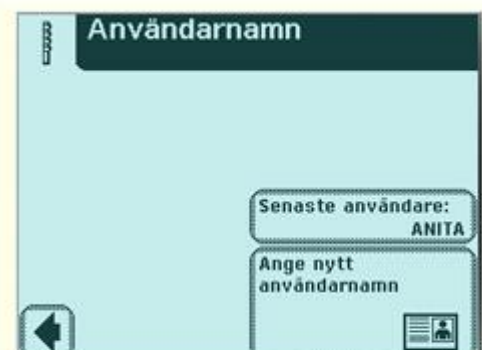

STEG
3


Ange ditt användarnamn genom att
skanna användar-ID med en
streckkodsläsare eller genom att trycka
på siffrorna/bokstäverna

Tryck på "OK"



STEG
4

Tryck på "Ange ny patient"

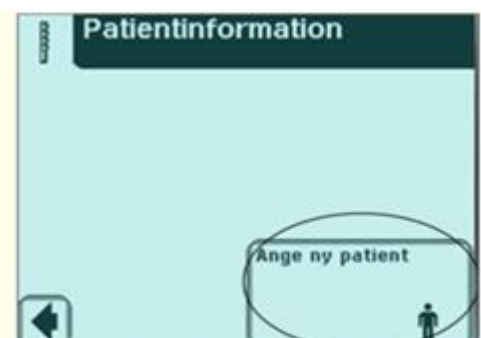

Snabbguide

Analys av urinsticka – Multistix

Med användar-ID

STEG

5

Skanna patient-ID med streckodsläsaren eller genom att trycka på siffrorna/bokstäverna

Tryck på OK



STEG

6

Doppa urinstickan i provet och tryck samtidigt på "START"



STEG

7

Dra stickan mot kanten på muggen/röret för att avlägsna överskottsurin.

Läska av långsidan på stickan mot en bit papper.

Placera stickan på släden.



STEG

8

Efter en minut är svaret klart och en remsa skrivs ut

